

Contactgegevens

Algemeen

0800 8 55 22
info@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Nonnenstraat 12/1 - 2200 Herentals

Provincie
Antwerpen

014 24 41 07
antwerpen@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Nonnenstraat 12/1 - 2200 Herentals

Provincie
Limburg

089 55 84 80
limburg@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Welzijns-campus 25 - 3600 Genk

Provincie
Oost-Vlaanderen

09 26 56 900
oostvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Jenny Tanghestraat 2 - 9050 Gent (Ledeberg)

Provincie
Vlaams-Brabant

016 66 06 03
vlaamsbrabant@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Staatsbaan 4 A - 3210 Lubbeek


Provincie
West-Vlaanderen

050-63 40 04
westvlaanderen@gerustzorgcentrale.be
Gerust zorgcentrale,
Annuntiatenstraat 47 - 8000 Brugge

V.U.: Steven Hermans, Gerust Zorgcentrale vzw, Nonnenstraat 12/1, 2200 Herentals - december 2021

Personenalarm via simkaart

Gebruikershandleiding

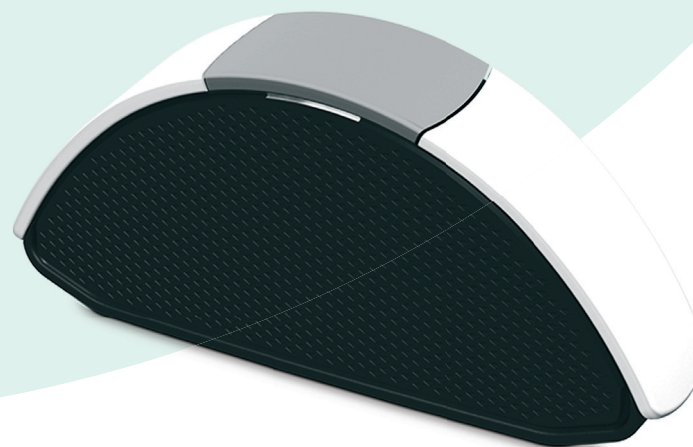


gerust

gerust

HOE MAAK JE EEN ALARMOPROEP?

Om een alarm te maken druk je op de middelste knop of op de knop op je hanger. (1)

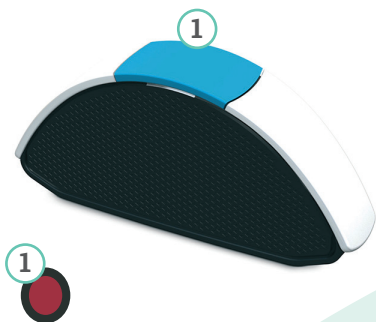

Het toestel maakt verbinding met de zorgcentrale.

Via de luidspreker aan de voorkant van het toestel kan je spreken en ons horen.

Vertel waarom je alarm maakte. Onze Gerust zorgcentrale stuurt zo snel mogelijk hulp of geeft je de nodige instructies om het toestel af te zetten.

TERUGMELDING DOOR DE HULPVERLENER



De lampjes van de knoppen 'telefoon' en 'envelop' flikkeren. (2) Wanneer de hulp is aangekomen, drukt deze op één van deze twee buitenste knoppen. Nadat we gedrukt hebben, horen we een piep. Het toestel maakt opnieuw verbinding met de zorgcentrale. Zo kan de zorgcentrale je melding helemaal afronden.

AANDACHTSPUNTEN

- **Het Solem SIM toestel bevat een simkaart dat een alarm maakt via een mobiel netwerk.** Van zodra het toestel wordt aangezet gaat deze op zoek naar signalen van beschikbare antennes.

- De lampjes aan de achterkant van het toestel geven de ontvangsterkte aan. (3) Het bereik kan soms wegvallen.



- ● Maximale ontvangst
- ● Gemiddelde ontvangst
- ● Zwakke ontvangst

- **Plaats het toestel richting de ramen zodat je een sterk signaal ontvangt.**
- **Trek NOOIT de stekker uit het stopcontact!** Bij uitval of afsluiten van netspanning of telefoonlijn zal het lampje onder de groene knop flikkeren. Na ongeveer één minuut zegt het toestel één keer 'power failure'. De knop onder de blauwe led knippert maar geeft geen pieptonen.

- **Zorg ervoor dat je je PAS-toestel en zender correct gebruikt.** Zorg er bv. voor dat er geen water in het PAS-toestel komt, dat je niets boven op het toestel plaatst, dat je het toestel niet afdekt,... Bij beschadiging door oneigenlijk gebruik van het toestel of de zender of bij verlies moeten we je de kosten aanrekenen.
- **Neem je zender nooit mee buitenshuis.**
- **Leg je gsm of draagbaar telefoontoestel niet te dicht bij je PAS-toestel.**
- **Gelieve de zorgcentrale steeds te informeren wanneer:**
 - je verhuist, met vakantie vertrekt of er een ziekenhuisopname is gepland.
 - een van de hulpverleners tijdelijk niet bereikbaar zal zijn, bv. wegens vakantie.